

VEINOPUS[®]

El nuevo tratamiento

Insuficiencia venosa

Piernas dolorosas, pesadas

Piernas hinchadas

Trastornos venosos durante el embarazo

Edema de los miembros inferiores*

Síndrome post trombótico

**Situaciones de alto riesgo
para sus venas**

...



Pregunte a su médico o a su farmacéuta o diríjase a

www.veinoplus.com


*De origen venoso

VEINOPLUS®


Principales resultados clínicos

REDUCCIÓN DEL DOLOR

Piernas adoloridas en una población de pacientes con insuficiencia venosa ¹

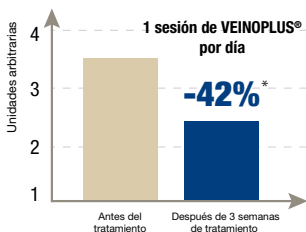


Piernas adoloridas en una población de mujeres embarazadas con insuficiencia venosa ²

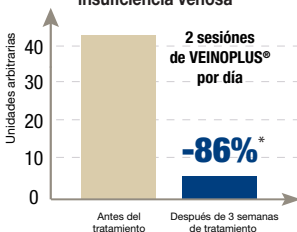

REDUCCIÓN DEL EDEMA

Reducción del edema en el tobillo en 30 pacientes CEAP C3³
Luego de 30 días de tratamiento con VEINOPLUS® ³

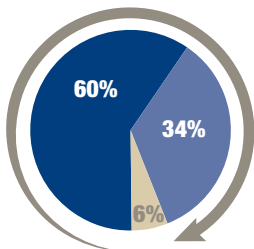


94% de casos

- Reducción total
- Reducción parcial
- Ninguna reducción

MEJORÍA DE LA CALIDAD DE VIDA

Reducción del impacto negativo de la insuficiencia venosa²
luego de 3 semanas de tratamiento en una población de 38 mujeres embarazadas

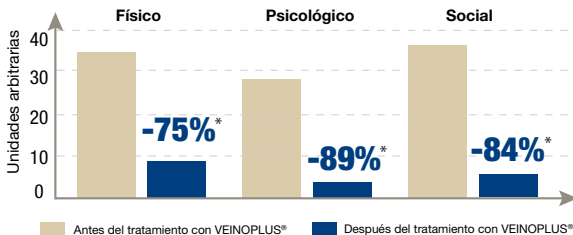

1- ZUCCARELLI F. et al. : Activación de la bomba muscular de la pantorrilla por medio de la electroestimulación VEINOPLUS® Angiologie (2005) • 2- LE TOHIC A et al. Efectos de la electroestimulación VEINOPLUS® sobre los trastornos circulatorios de los miembros inferiores en la mujer embarazada. (datos extraídos del grupo N°2) • 3- BOGACHEV V.Y. et al. : La estimulación neuromuscular con VEINOPLUS® es un nuevo método para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores (publicación en proceso de preparación)

*significativo p<0.001

VEINOPPLUS®

es recomendado para:

■ Insuficiencia venosa

- Piernas adoloridas, pesadas
- Trastornos venosos durante el embarazo
- Piernas o Tobillos hinchados
- Edema de los miembros inferiores
- Calambres nocturnos*
- Piernas inquietas*
- Síndrome post trombótico
- Ulceras venosas**

■ Situaciones arriesgadas

- Antecedente de TVP (Trombosis Venosa Profunda)
- Profesiones de alto riesgo (meseros, azafatas...)
- Posición prolongada de pie o sentado
- Inmovilización de los miembros inferiores (yeso)
- Vuelos de largo trayecto > 4h
- Falta de ejercicio
- Exceso de peso, obesidad

**88% de usuarios
satisfechos según
nuestra última
encuesta realizada*****



* En el caso de origen venoso ** Bajo Receta médica

*** Encuesta realizada sobre 100 pacientes

VEINOPLUS®

¿ Qué es VEINOPLUS® ?

Es un electroestimulador médico que funciona con pila (CE médico: clase IIa). VEINOPLUS® fue concebido por el Dr. Jozef Cywinski, uno de los expertos mundiales en materia de electroestimulación.

VEINOPLUS®... una tecnología eficaz

VEINOPLUS® estimula la bomba muscular de la pantorrilla que es la responsable de la mayor parte del retorno venoso al corazón. Gracias a esta acción VEINOPLUS® posee efectos terapéuticos únicos sobre los síntomas de las enfermedades venosas (desde el simple dolor hasta las situaciones mas graves de la enfermedad venosa). Estos efectos han sido demostrados y acreditados clínicamente en varios estudios clínicos efectuados desde 2004 en Francia, en Reino Unido, Estados Unidos y en Rusia.

VEINOPLUS®... una tecnología segura



VEINOPLUS® responde a las normas de seguridad más estrictas establecidas en USA (norma AAM/ANSI NS-4 1986/2002°).

VEINOPLUS® puede usarse durante el embarazo, un estudio clínico realizado en Francia demostró que el uso de VEINOPLUS® es benéfico para la madre y sin riesgo para el feto.

Usar VEINOPLUS®... nada mas fácil

- Aplicar un electrodo en cada pantorrilla si los síntomas se presentan en cada pierna (o aplíquelos de cada lado de la pantorrilla si los síntomas solo estan presentes en una sola de ellas)
- Regle la intensidad hasta sentir una fuerte pero confortable contracción de la pantorrilla
- El aparato se para automáticamente tras 20 minutos de utilización.

¿ Cuando usar VEINOPLUS® ?

Dependiendo de sus síntomas

Mínimo una vez por día al comienzo del tratamiento

Enseguida... cuando lo necesite, no existe el riesgo de exceso de utilización.

...Entre más use VEINOPLUS® más eficaz será

¿ Existen contraindicaciones ?

Las personas con marcapasos no deben servirse de este aparato.

Por otras precauciones, remítase al manual de instrucciones.

Si tiene preguntas

Vaya a la página Internet www.veinoplus.com, o a la de su distribuidor local.

*Los efectos no son garantizados y pueden variar según las personas y las patologías subyacentes.

1. LE TOHIC A et al. Efectos de la electroestimulación VEINOPLUS® sobre los trastornos circulatorios de los miembros inferiores en la mujer embarazada

Fabricado por:

Ad Rem Technology

ACL 427 054 1

162, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - FRANCE

Tél : +33 (0)1 42 60 00 22 - Fax : +33 (0)1 42 60 00 63 - www.adremtechnology.com

ISO 13485:2003 & ISO: 9001:2008

Distribuido por: